

neXus 3

Le neXus 3 est un déambulateur innovant qui est de haute qualité et le plus vendu. Le cadre en X du neXus se replie en rassemblant les deux côtés. Il est ainsi facile et rapide à plier. Il peut également rester replié sans support ce qui permet de limiter son encombrement.

Les freins sans câble s'assurent qu'aucun des câbles ne peuvent être capturés sur les objets autour de la maison, augmentant ainsi la sécurité. Le neXus a un dossier rembourré qui peut être retourné pour offrir deux positions d'assise et une fourche avant à double roulement permettant un déplacement en douceur. Disponible avec un sac souple qui peut rester sur le déambulateur même en position repliée, le neXus est maintenant disponible avec des kits d'accessoires optionnels qui expriment votre personnalité!



Système de freinage sans câble

Grâce au système de freinage sans câble il y a moins de risque de blessure et en même temps une sécurité accrue car aucun câble ne peut s'attraper sur des objets autour de la maison.

Ergonomie supérieure de la marche

La conception de pliage croisée permet un grand espace pour marcher qui se traduit dans le meilleur modèle possible de marchant pour l'utilisateur. Le siège profilé et rembourré offre un lieu de repos très confortable. Pour plus de confort et de soutien un dossier rembourré vient standard sur le déambulateur.

Léger et très facile à plier même avec le sac souple sur le déambulateur

La conception de pliage croisé rend le déambulateur très facile à plier et à ranger. Il peut également rester replié sans support. Le sac souple vient standard et se replie avec le déambulateur. Il a des poches pratiques pour stocker des éléments tels qu'une tablette ou un téléphone mobile.



Kit d'accessoires violet

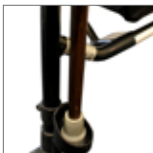


Kit d'accessoires tartan



Kit d'accessoires bleu

Accessoires

	Plateau Pratique pour poser des éléments légers. No. de modèle : 80702		Panier dur Panier est idéal pour magasiner. Capacité max. : 10 lb. No. de modèle : 4510		Sac souple Sac souple se plie avec le déambulateur. Inclus avec le produit ou commandés. Capacité max. 10 lb. No. de modèle. 8050105 (5 pièces).
	Frein ralentisseur Empêche le déambulateur de se déplacer trop rapide et permet une vitesse de marche contrôlée pour l'utilisateur. No. de modèle : 4950		Dossier Donne un soutien pour le dos en position assise. Inclus avec le produit. No. de modèle : P48010		Kit d'accessoires Compris d'un sac souple, dossier et poignée. No. de modèle : 89991 Violet, 89992 Tartan, 89990 Bleu
	Porte-canne Simplifie le transport d'une canne. No. de modèle : 80703		Monte-trottoir Permet le déambulateur à soulever légèrement sur un trottoir. Inclus avec le produit. No. de modèle : 4879		

Spécifications techniques

Description	No. de modèle	Hauteur min	Hauteur max	Hauteur du siège ¹	Largeur	Distance entre les poignées	Diamètre des roues	Poids du produit	Capacité max.
neXus 3 super bas avec sac souple	460018	Rég: 70cm/27,5po Haut: 77,5cm/30,5po	Rég: 77,5cm/30,5po Haut: 85cm/33,5po	47cm / 18,5po	61cm / 24po	44,5cm/ 17,5po	20 x3 cm / 7,9pox1,2po	6,8 kg / 15 lb	150 kg / 330 lb
neXus 3 bas avec sac souple	460022	Rég: 75cm/29,5po Tail: 77,5cm/ 30,5po	Rég: 85cm/33,5po Haut: 92,7cm /36,5po	53,3cm / 21po	61cm / 24po	44,5cm/ 17,5po	20 x3 cm / 7,9pox1,2po	6,8 kg / 15 lb	150 kg / 330 lb
neXus 3 standard avec sac souple	460024	Rég: 83cm/32,5po Tail: 82,6cm/32,5po	Rég: 93cm/36,5po Haut: 100cm/39,5po	61cm / 24po	61cm / 24po	44,5cm/ 17,5po	20 x3 cm / 7,9pox1,2po	7,3 kg / 16 lb	150 kg / 330 lb

¹Ajouter 1po pour le coussin. Pour les poignées sur modèle haut, ajouter "T" à la fin du code produit.

Spécifications supplémentaires: Distance entre les roues : 47 cm/ 18,5po, Grandeur du siège : 40,6 cm x 24,1 cm / 16po x 9,5po, Distance replié : 25,4cm /10po