

SUPERPOLE™

Lorsqu'on songe à des produits résidentiels de sécurité novateurs et adaptables et qui peuvent être utilisés partout dans la maison, le SuperPole est le chef de file de l'industrie. Le SuperPole est un poteau de sécurité qui peut être aisément installé entre le sol et le plafond en tournant simplement une vis de fixation. La pression créée par cette vis est suffisamment forte pour vous soutenir; ainsi, il n'est généralement pas nécessaire pas de percer des trous dans le plancher ou le plafond. Ceci est idéal lorsqu'on doit déplacer et réinstaller le poteau. En outre, il dispose d'une poignée qui offre le confort et une surface de préhension améliorée. Toute cette fonctionnalité se retrouve dans une conception épurée et moderne qui se fond dans toutes les pièces.




CARACTÉRISTIQUES

Hauteur du sol au plafond	93 à 99 po
Diamètre du poteau	1,5 po
Matériau	Acier allié
Fini	Enduit blanc antimicrobien (PCW)
Code (capacité de poids)	SP-S (300 lb) <i>SuperPole</i> SP-HD (450 lb) <i>SuperPole bariatrique</i> SP-CUT (300 lb) <i>SuperPole sur mesure</i>

Installez vous-même

DIMENSIONS DU PRODUIT

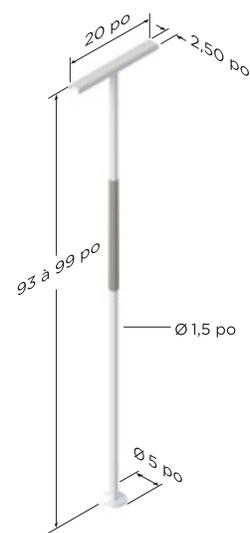

AJOUTS POUR SUPERPOLE

SuperBar	Consultez la page 3
SuperTrapeze	Consultez la page 4

ACCESSOIRES D'INSTALLATION - SUPERPOLE

Extendeur Uni-Fit	Consultez la page 5
SuperPole Ultra	Consultez la page 5
Plaque murale à rallonge pour plafond	Consultez la page 5
Plaque murale à angle pour plafond	Consultez la page 5